

Kính áp tròng mềm dùng 2 tuần dành cho mắt lão thị

SEED 2week Pure[®]

Multistage



Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với kính áp tròng, hãy ngừng sử dụng và nhanh chóng tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc mắt.

Đặc tính vật lý của tròng kính

Tên sản phẩm	Kính áp tròng dùng 2 tuần dành cho mắt lão thị
Chủng loại	SEED 2weekPure UP Multistage
Cách dùng	Kính áp tròng dùng 2 tuần
Danh mục FDA	Group IV
Vật liệu	2-HEMA, monome mang điện tích âm, monome mang điện tích dương, MMA, EGDMA
Chất tạo màu	Chất màu phthalocyanine
Màu tròng kính	Màu xanh lam
Chất hấp thụ tia UV	Benzotriazole
Độ thấm thấu Oxy	$30.0 \times 10^{-11} (\text{cm}^2/\text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2/(\text{mL} \times \text{mmHg}))$
Tốc độ truyền dẫn Oxy	$33.3 \times 10^{-9} (\text{cm}/\text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2/(\text{mL} \times \text{mmHg}))$ (S-3.00D)
Chỉ số khúc xạ	1.406
Khả năng truyền sáng	98%
Độ ngâm nước	58%
Phương pháp sản xuất	Phương pháp đúc khuôn

Thông số kỹ thuật tròng kính (Đang mở rộng thông số tròng kính)

Bán kính cong của kính	8.60mm
Dải độ	+5.00D ~ +0.50D (bước nhảy 0.25D), ±0.00D -0.50D ~ -6.00D (bước nhảy 0.25D) -6.50D ~ -10.00D (bước nhảy 0.50D)
Độ ADD	Loại [A] +0.75D, loại [B] +1.50D
Hướng trục	180°
Đường kính	14.2mm
Độ dày trung tâm	0.09mm (S-3.00D)
Dấu khắc	In “2PM”
Quy cách	6 kính/ hộp




Mang lại tầm nhìn và sự thoải mái cho đôi mắt.

Kính áp tròng dùng 2 tuần dành cho mắt lão thị "SEED 2weekPure Moisture Multistage" được thiết kế để mang lại tầm nhìn tự nhiên và cảm giác đeo thoải mái. Vật liệu "SIB*" giúp loại bỏ cặn bám và duy trì độ ẩm của kính. Thiết kế công suất bổ sung thấp được áp dụng để ngăn chặn sự suy giảm thị giác.

* SIB là vật liệu của SEED có khả năng tương thích sinh học vượt trội, có cấu trúc tương tự như protein là thành phần cơ bản của cơ thể con người. "SIB" là viết tắt của SEED Ionic Bond.



Thiết kế lens

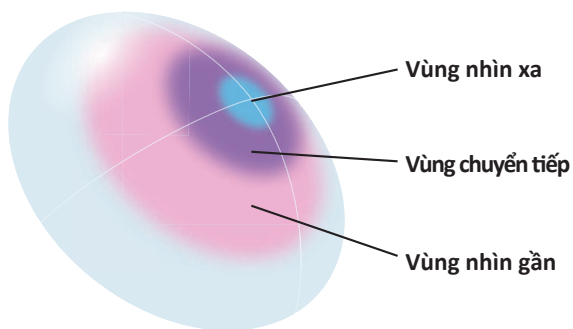

SEED 2weekPure UP Multistage mang lại cả tầm nhìn xa và gần, cho phép người dùng thoải mái nhìn thấy cả vật thể ở xa và gần.


** Tầm nhìn và cảm giác đeo kính có thể khác nhau ở mỗi người.



Chống nhiễm bẩn

Vật liệu zwitterionic "SIB", có khả năng tương thích sinh học vượt trội và chứa cả ion dương và âm, làm giảm sự tích tụ cặn và tạp chất trong khi vẫn đảm bảo hàm lượng nước cao. Người đeo có thể tiếp tục sử dụng thoải mái trong 2 tuần.

* SIB là viết tắt của SEED Ionic Bond

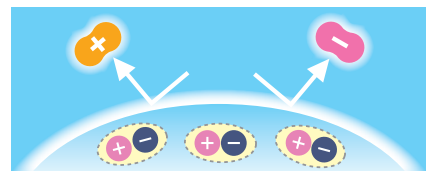

VD: Cặn protein chứa ion dương.

VD: Dầu thừa hoặc cặn mỹ phẩm chứa ion dương.



Giữ ẩm vượt trội

Dung dịch bảo quản kính của SEED có chứa một chất tự nhiên gọi là Axit Alginate. Thông qua hiệu ứng tổng hợp của dung dịch này với vật liệu zwitterionic "SIB" (chứa cả hai ion), SEED đã tạo ra SEED 2weekPure UP Multistage có độ ẩm tối ưu và khả năng giữ ẩm cao.



Chất lượng Nhật Bản



Dấu khắc

Dễ dàng phân biệt mặt trong và mặt ngoài của lens.



Chứa chất hấp thụ tia cực tím



SEED 2week PureTM
moisture Multistage