

Kính áp tròng mềm dùng 2 tuần dành cho mắt loạn thị

SEED 2week PureTM
moisture ASTIG



Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì với kính áp tròng, hãy ngừng sử dụng và nhanh chóng tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc mắt.

Đặc tính vật lý của tròng kính

Tên sản phẩm	SEED 2weekPure moisture
Tên thương hiệu	SEED 2weekPure moisture cho mắt loạn thị
Cách dùng	Kính áp tròng dùng 2 tuần
Danh mục FDA	Group IV
Vật liệu	2-HEMA, monome mang điện tích âm, monome mang điện tích dương, MMA, EGDMA
Chất tạo màu	Chất màu phthalocyanine
Màu tròng kính	Màu xanh lam
Chất hấp thụ tia UV	Benzotriazole
Độ thấm thấu Oxy	$30.0 \times 10^{-11} (\text{cm}^2/\text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2/(\text{mL} \times \text{mmHg}))$
Tốc độ truyền dẫn Oxy	$23.1 \times 10^{-9} (\text{cm}/\text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2/(\text{mL} \times \text{mmHg}))$ (S -3.00D, C -1.25D, Axis 180°)
Chỉ số khúc xạ	1.406
Khả năng truyền sáng	98%
Độ ngâm nước	58%
Phương pháp sản xuất	Phương pháp đúc khuôn

Thông số kỹ thuật tròng kính (Đang mở rộng thông số tròng kính)

Bán kính cong của kính	8.60mm
Dải độ	$\pm 0.00\text{D} \sim -6.00\text{D}$ (bước nhảy 0.25D) $-6.50\text{D} \sim -8.00\text{D}$ (bước nhảy 0.50D)
Khúc xạ trực	-0.75D, -1.25D, -1.75D
Hướng trục	180°
Đường kính	14.2mm
Độ dày trung tâm	0,13mm (với độ kính S-3,00D, độ trục C-1,25D, trục 180°)
Dấu khắc	In ký hiệu "2PA" trên hai mặt
Quy cách	6 kính/ hộp

SEED

SEED 2week PureTM
moisture ASTIG

Kính áp tròng mềm dùng 2 tuần dành cho mắt loạn thị

Hỗ trợ thị lực của bạn với
chất lượng từ Nhật Bản



Made
in
Japan

SEED

Thị lực rõ ràng suốt 2 tuần, mang lại cảm giác dễ chịu cho mắt

"SEED 2weekPure giữ ẩm cho mắt loạn thị" có thiết kế độc đáo cho mắt nhìn sáng rõ, cùng hoạt chất giữ ẩm tự nhiên mang lại cảm giác dễ chịu khi đeo, giúp cải thiện thị lực và chất lượng cuộc sống của bạn.



Thị lực rõ ràng

Thiết kế độc quyền với **mặt kính toric phía trước** và **Dynamic Prism Ballast** của SEED giúp việc đeo và tháo tròng kính dễ dàng, đảm bảo độ ổn định cho **mặt kính**. Thiết kế này giúp tối ưu khả năng điều chỉnh loạn thị của kính áp tròng.

Thấu kính Toric phía trước

Khả năng hiệu chỉnh loạn thị nằm ở mặt trước tròng kính nên việc tháo và đeo kính rất dễ dàng, mang lại hiệu quả ổn định trong điều trị loạn thị.

Dynamic Prism Ballast

Thiết kế tròng kính tối ưu với phần dưới có độ dày phù hợp và phần trên mỏng hơn tùy theo độ lệch khúc xạ của từng tròng kính. Ngăn việc tròng kính bị xô dịch vị trí khi nháy mắt, giữ cho tròng kính ở vị trí đúng.




Khả năng chống nhiễm bẩn cao

Vật liệu **Zwitterionic "SIB"**, mang tính tương thích sinh học vượt trội, có cả ion âm và ion dương, giúp giảm thiểu tích tụ cặn và tạp chất, đồng thời duy trì độ ngậm nước cao. Cảm giác thoải mái khi sử dụng tròng kính trong 2 tuần.

*"SIB" là viết tắt của SEED Ionic Bond.

(Sơ đồ khái quát khả năng chống bám cặn)

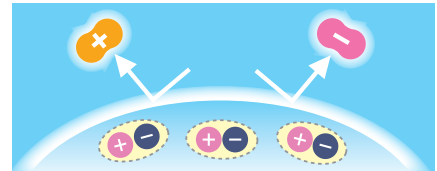

Ví dụ: cặn protein chứa ion dương



Ví dụ: dầu thừa hoặc cặn bẩn từ mỹ phẩm chứa ion âm



Khả năng giữ ẩm vượt trội

Dung dịch kính áp tròng của chúng tôi chứa hoạt chất tự nhiên **Axit Alginate**. Nhờ tác dụng cộng hưởng với vật liệu **zwitterionic "SIB"** (chứa cả ion âm và ion dương) tạo nên tròng kính có độ ngậm nước tối ưu và khả năng giữ ẩm vượt trội.



Chất lượng Nhật Bản



Dấu khắc

Dễ dàng phân biệt mặt trong và mặt ngoài của tròng kính.



Chất hấp thụ tia UV



SEED 2weekPureTM
moisture ASTIG

*Độ vừa vặn và khả năng điều chỉnh thị lực có thể khác nhau tùy người dùng.